


Dynamics®


ANESTESIA

Catálogo de Productos

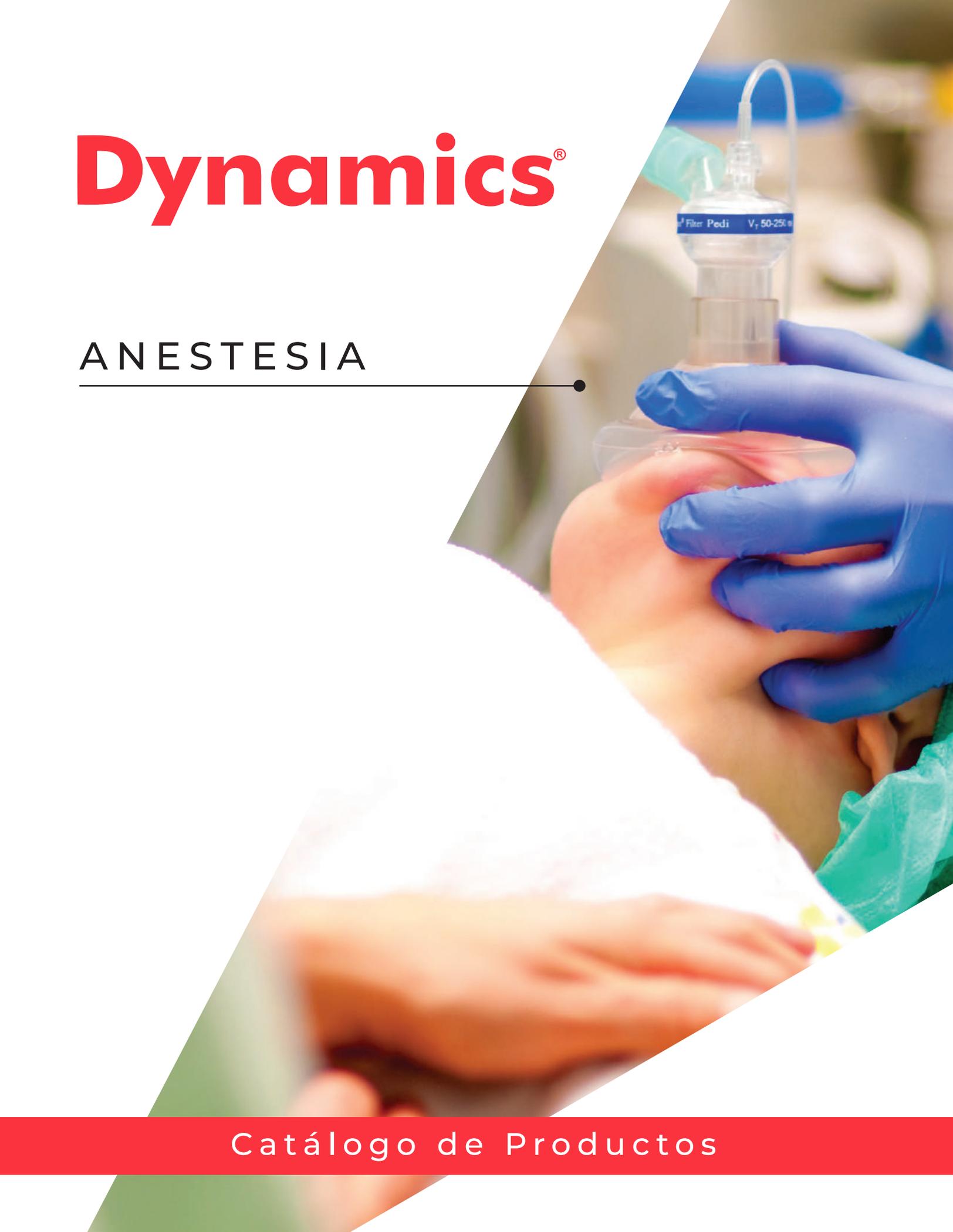

CIRCUITO DE ANESTESIA COAXIAL ADULTO

Conjunto de elementos distribuidos en una sola manguera que permiten la conducción de gases y/o vapores anestésicos, desde la máquina de anestesia hacia el paciente, realizando un intercambio de gases.

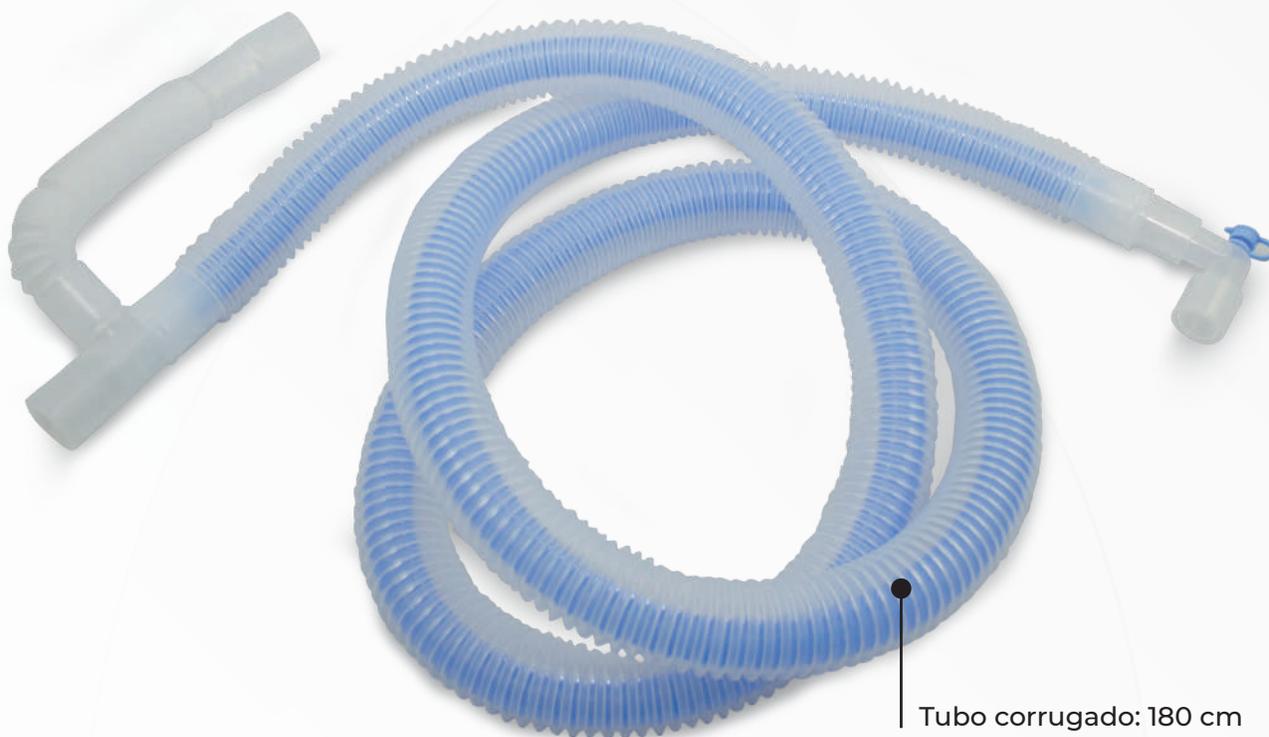

Libre de látex

ESTÉRIL OE

Código:
7897400752

Dynamics®

CIRCUITO DE ANESTESIA COAXIAL ADULTO

INDICACIONES: Respiración espontánea y mecánica.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sistema Coaxial. El tubo de inhalación va dentro del tubo de exhalación, los gases inhalados son calentados por los gases exhalados.
- Tubos corrugados. Permiten la conducción de gases sin riesgo de torsión, son maleables y permiten un mejor posicionamiento del paciente.
- Bajo compliance y resistencia en tubos. Disminuye el espacio muerto y la resistencia del flujo de aire.
- Eficacia bacteriana y viral de filtración (BFE): 99,9999%
- Conexiones seguras. Empalme justo entre los componentes del sistema para evitar desconexiones.
- Permite la medición de los gases del flujo de aire. Esta función se realiza a través del puerto del gas que posee el tubo que conecta con el paciente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida: 180 cm
Unidad de Manejo:
1 unidad por empaque (UNID)

PRESENTACIÓN:
Circuito circular de anestesia para respiración espontánea y mecánica.